


FAST DE LA FONCTION PRINCIPALE : «Permettre le transport du malade alité et la pratique de soins »

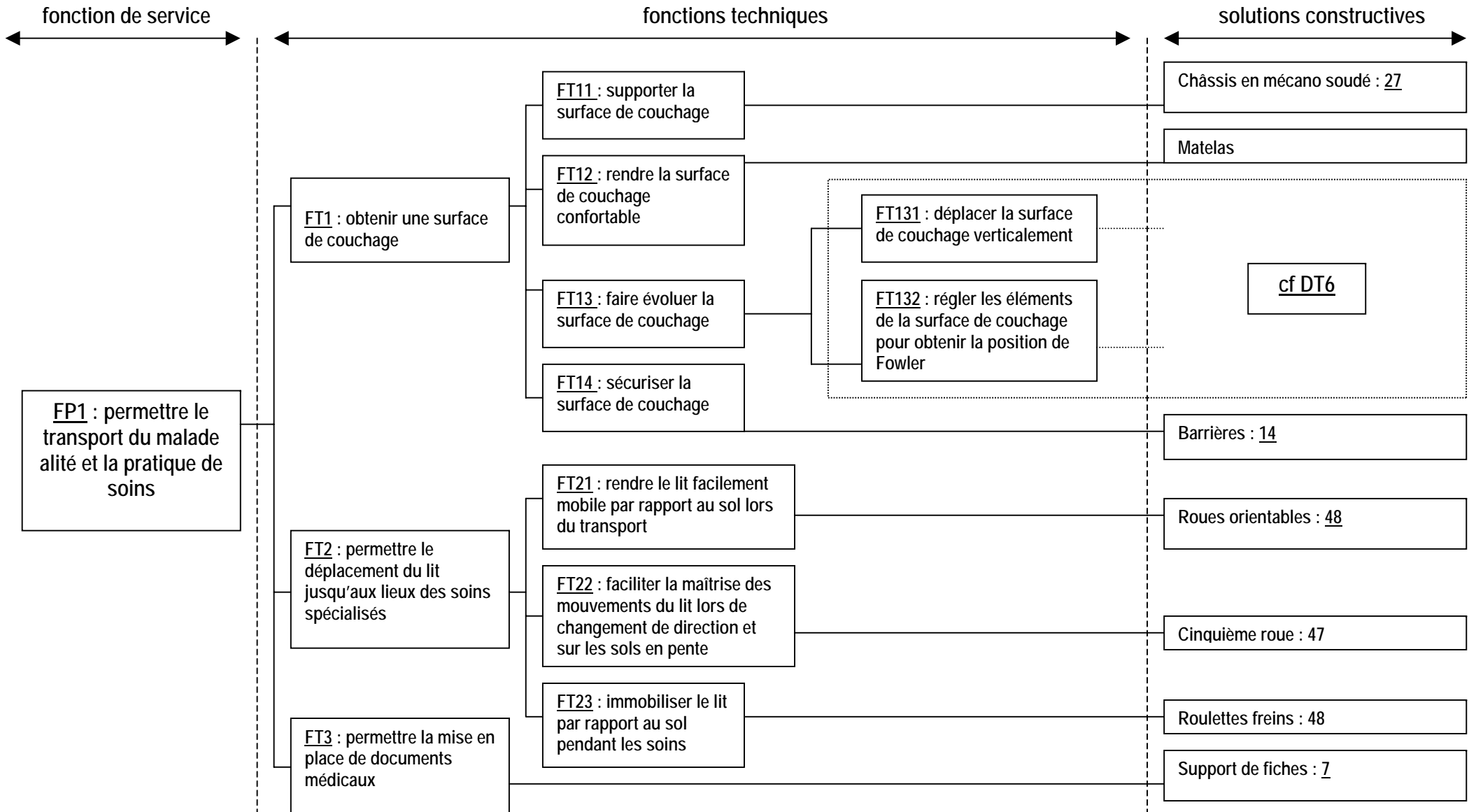

FAST DE LA FONCTION PRINCIPALE : «Permettre le transport du malade alité et la pratique de soins»

Développement des fonctions techniques : FT131 et FT132

fonctions techniques

solutions constructives

FT131 : déplacer la surface de couchage verticalement

FT1311 : modifier l'effort dans le vérin

FT1312 : guider en translation

FT13111 : guider en rotation l'embout supérieur du vérin hydraulique 31 par rapport au cadre articulé 29

FT13112 : guider en rotation la chape inférieure du vérin hydraulique 31 par rapport à 27

FT13121 : guider en rotation les cadres articulés gauche et droit 28 et 29 par rapport au châssis intermédiaire 4

FT13122 : guider en rotation les cadres articulés gauche et droit 28 et 29 par rapport au châssis inférieur 27

FT1313 : diminuer le frottement

FT132 : régler les éléments de la surface de couchage pour obtenir la position de Fowler

FT1321 : guider

FT1322 : modifier l'effort dans le vérin

FT1323 : diminuer le frottement

- Axe de la tige du vérin hydraulique : 39
- Anneau élastique : 40
- Alésage de la chape du vérin hydraulique
- Alésages et plans de 29

- Portées du vérin hydraulique : 31
- Boulon : 35
- Equerre : 34
- Alésage et plans de 27

- Guide : 33
- Vis CHc : 30, Rondelle W : 32
- Alésages et plans de 28 et 29

- Guide : 33
- Vis CHc : 30
- Rondelle W : 32
- Alésages et plans de 28 et 29

Bagues : 51

Biellettes : 5

Ressort à gaz : 25 a

Bagues : 10 a