

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

Optique Lunetterie

E2 – Epreuve Technologique

ÉTUDE ET SUIVI DE DOSSIER

DOSSIER RESSOURCES

Ce dossier comprend :

Thème	Page
Page de garde	1 / 4
DOCUMENT RESSOURCE 1 : Dossier client du 02/02/2015	2 / 4
DOCUMENT RESSOURCE 2 : Prescription du client du 02/02/2015	2 / 4
DOCUMENT RESSOURCE 3 : Fiche technique verre EXCEPTIO STYLIS CONVEXE	3 / 4
DOCUMENT RESSOURCE 4 : Fiche technique verre OMEGA EXCEPTIO	4 / 4



CODE EPREUVE : 1706-OL-T2		EXAMEN : BACCALAUREAT PROFESSIONNEL	SPECIALITE : Optique-Lunetterie
SESSION 2017	DOSSIER RESSOURCES	EPREUVE : E2 – Epreuve technologique ÉTUDE ET SUIVI DE DOSSIER	Calculatrice autorisée
Durée : 3 h 00		Coefficient : 3	Page : 1 / 4

DOCUMENT RESSOURCE 1

Dossier du 02/02/ 2015

NOM : LE QUESNOY Prénom : Catherine Date de naissance : 10/08/1982					
Profession : infirmière					
Adresse : 5 rue des sorbiers France				Téléphone : 06.12.22.07.55	
Date : 02/02/2015		Prescripteur : D^{teur} FOREST		Date de l'ordonnance : 02/02/2015	
PRESCRIPTION	VL. OD :	+10,00	VP		
	VL. OG :	+10,00	VP		
PRISES DE MESURES	Ecart pupillaires VL		Ecart pupillaires VP		Hauteurs
	OD	30	OD		OD 20
	OG	28	OG		OG 20
MONTURE	Marque /fabricant	Modèle	Coloris	Branche	Taille
	OXIBIS	osiris	05	145	48 □ 17
VERRES	Nom commercial		Indice	Traitements	Diamètre
	EXCEPTIO STYLIS CONVEXE		1.66	Crizal forte UV	60
	OPTIONS	Précalibrage			

DOCUMENT RESSOURCE 2

Docteur FOREST Bastien
Ophthalmologiste
 6 place de la Bastille
 62600 BERCK
 Tél : 03.21.54.66.26
 ADELI 62.18.0133.1

Berck, le 02/02/2015
 Madame LE QUESNOY Catherine

ORDONNANCE DE LUNETTES

Une paire de lunettes avec monture :

Œil droit :

Vision de loin : +10,00 δ

Œil gauche :

Vision de loin : +10,00 δ

STYLIS®

INFOS PRODUIT

■ Unifocal organique sphérique

INFOS TECHNIQUES


■ STYLIS

 1,665  1,36  32  400  100%  100%

EXCEPTIO® STYLIS® CONVEXE

INFOS PRODUIT

■ Unifocal organique sphérique à forte puissance et/ou fort prisme
- Antireflet systématique

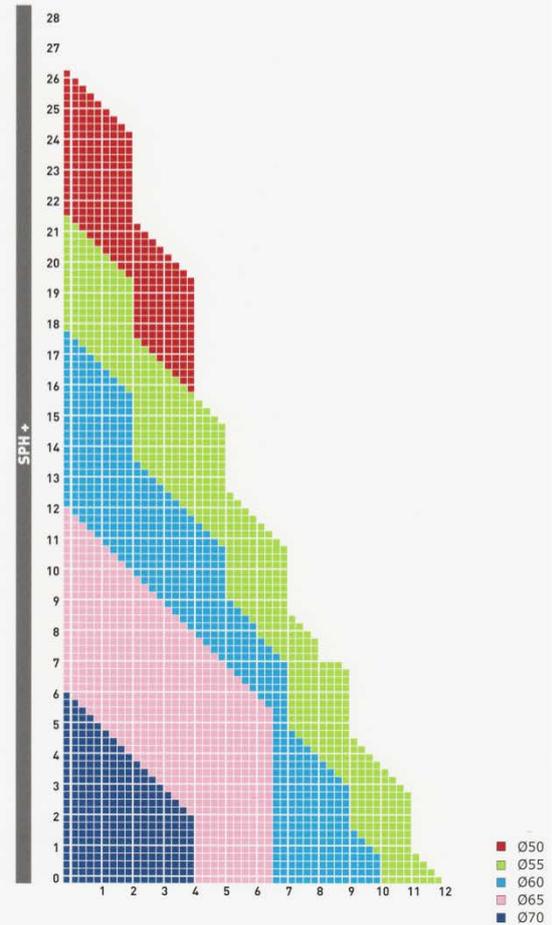

332

OMÉGA EXCEPTIO®

INFOS TECHNIQUES

■ ORMA

1,502
 1,32
 58
 355
 93 %
 100 %

INFOS INDICATIONS ET RECOMMANDATIONS

- Verre destiné aux fortes corrections positives (forts hypermétropes ou aphaques)
- Préal fortement recommandé
- Traitement UVX recommandé pour les aphaques
- Centrage d'un verre asphérique
- Adaptation : l'équipement doit toujours être positionné le plus près possible des yeux

OPTIONS DE FABRICATION

- Préal
- Prismes $\leq 5 \Delta$
- Prismes $> 5 \Delta$ nous consulter

INFOS PRODUIT

- Unifocal organique lenticulaire
 - Asphérisation optique dans la zone centrale et asphérisation géométrique dans la zone périphérique
 - Diamètre total de 67 mm
 - Biconvexe à partir de +23 dioptries

COMMANDE

- Informations indispensables à toute demande :
 - Imprimé de précalibrage avec forme réelle du calibre, écarts et hauteurs pupillaires

AVANTAGES

- À correction équivalente, verre plus léger et plus mince qu'un unifocal standard
- Suppression du scotome annulaire
- Montage possible dans une monture classique grâce à une zone périphérique plus mince

AUTRE TRAITEMENT

- UVX

